

mectron

medical technology




easyjet pro

Lucidatore a getto
di bicarbonato



easyjet pro

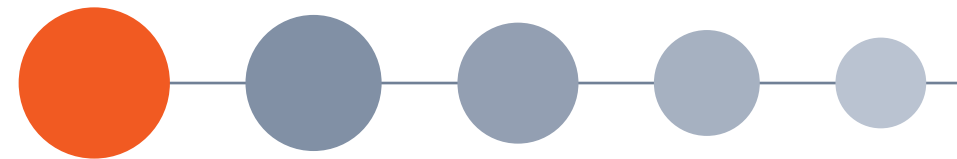

lucidatore a getto di bicarbonato
con innesto rapido per turbina



L'**easyjet pro** rappresenta una nuova dimensione di pulitori con innesto rapido per turbina. Un semplice click e la turbina diventa una performante unità per profilassi che offre i medesimi vantaggi degli apparecchi Mectron da tavolo: un efficiente getto di polvere, la semplicità d'uso e l'affidabilità. La forma e l'equilibrio consentono altresì una posizione ottimale nella mano ed un orientamento controllato del getto di polvere. Tutti i simpatici colori disponibili renderanno la tua profilassi ancora più brillante!

Camera per la polvere

- contiene 12 g di polvere
- i nuovi condotti della polvere consentono un getto di polvere costante ed efficace
- si esclude il rischio di otturazioni

Terminale a spray

- angolato a 120°
- si inserisce con un semplice click
- ruota di 360°
- la polvere e l'acqua vengono convogliate separatamente finché non raggiungono l'ugello
- l'acqua avvolge il getto di polvere e di aria ed impedisce la formazione di una nube di polvere
- completamente sterilizzabile



Protezione di silicone

- protegge i denti
- previene l'infiltrazione di detriti
- smontabile
- completamente sterilizzabile



Coperchio della camera per la polvere

- anello di chiusura in acciaio
- semisfera trasparente per il controllo ottimale del livello di polvere
- la filettatura triangolare permette una facile apertura
- la particolare forma della filettatura previene eventuali depositi di polvere

Dati tecnici

- pressione aria in entrata tra 2.3 e 3.2 bar
- pressione acqua in entrata tra 0 e 3 bar

easyjet pro si contraddistingue per via della sua tecnologia innovativa, che garantisce una elevata affidabilità. Tutti i componenti sono ottimizzati per un uso quotidiano.



la tecnologia

affidabile ed ergonomico

gli attacchi per turbina

easyjet pro offre una grande flessibilità d'utilizzo grazie ai suoi sei differenti attacchi per turbina. Con un semplice click sarete in grado di svolgere la vostra profilassi.



Unifix® - Unifix® L



Multiflex® - Multiflex® lux



Sirona® R - Sirona® B



Roto Quick® - Roto Quick® lux



Midwest



Borden



prima del trattamento con easyjet pro durante il trattamento con easyjet pro dopo il trattamento con easyjet pro

Effetto

Particelle di bicarbonato di sodio ad elevata accelerazione unite all'acqua permettono di ottenere un getto finissimo, regolare e preciso. Il getto elimina le discromie più rapidamente ed efficacemente rispetto all'uso di testine di gomma e pasta lucidante, anche negli spazi interdentali.



Gusto

Il gusto piacevole deriva da un nuovo aroma di limone addizionato con una maggiore quantità di dolcificante.



Tapo dosatore

Ogni bottiglia è dotata di un tappo con misurino, che indica la quantità di polvere adeguata ad ogni apparecchio Mectron a getto di polvere.

Qualità

Sono state perfezionate la scorrevolezza e l'idrofobizzazione. Ciò consente un flusso di polvere più costante e quindi un risultato migliore nel trattamento.



la polvere

La **prophyllaxis powder** Mectron viene fornita in pratici flaconi di plastica. Ogni confezione contiene due flaconi di **prophyllaxis powder** Mectron da 250 g cad.



MECTRON EASYJET PRO UNA PROFILASSI BRILLANTE!

www.mectron.com – mectron@mectron.com

mectron s.p.a., via Loreto 15/A, 16042 Carasco (Ge), ITALIA, tel +39 0185 35361, fax +39 0185 351374



mectron
medical technology

© Copyright mectron S.p.A., Carasco, Italia
Tutti i diritti riservati. Testo, immagini e grafica delle brochure mectron sono protetti dai diritti d'autore e da altre leggi sui diritti di proprietà. Senza autorizzazione scritta di mectron S.p.A. il contenuto non può essere copiato, divulgato, modificato o reso accessibile a terzi a scopi commerciali.